

Présentation

Référence: WM 555.119

Chariot WorkiMed Light Cart pour écran



Ce nouveau chariot médical de conception ergonomique idéal pour les écrans informatique jusque 26"


Le support d'attache de l'écran est aux normes de montages VESA 75/100 mm . Equipé d'un plan de travail confortable de L 490 mm x 300 mm pour les préparation médicamenteuses. Sur l'arrière un din rail de 400 mm de longueur y est fixé ce qui permet d'ajouter d'autres accessoires. Un support pour la souris poser sur le din rail y est également inclus ce qui libère le plan de travail pour y poser un clavier.

Sa construction est légère et robuste en aluminium permettant au nouveau chariot WorkiMed Light Cart pour écran les déplacements intensifs sans contraintes.

Une architecture ouverte qui offre des points d'accès sur toute la surface, facilitant les connections des appareils.

L'encombrement minimum est également un atout, il n'est que d'un diamètre de 630 mm à sa base ce qui lui permet des déplacements même dans des endroits exigus de l'hôpital.






Le chariot WorkiMed Light Cart pour écran respecte les normes d'hygiènes hospitalières et peut être désinfecté dans les moindres détails, roues comprises, aucunes aspérités dans sa conception visant à un nettoyage complet et aisé contribuant au contrôle des infections.

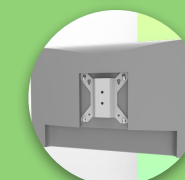

Présentation

Référence: WM 555.119




Chariot WorkiMed Light Cart pour écran

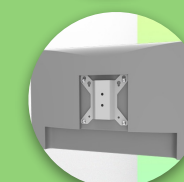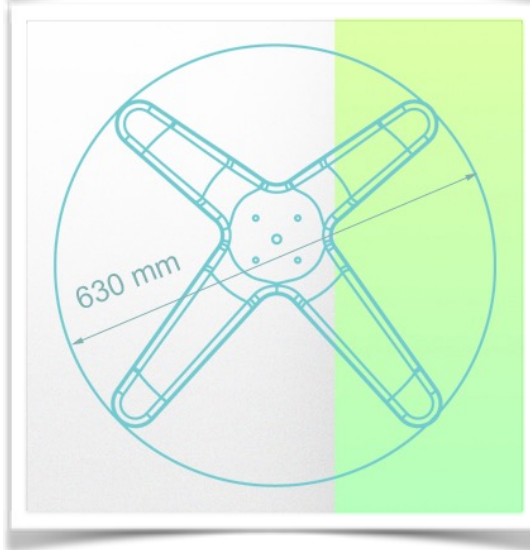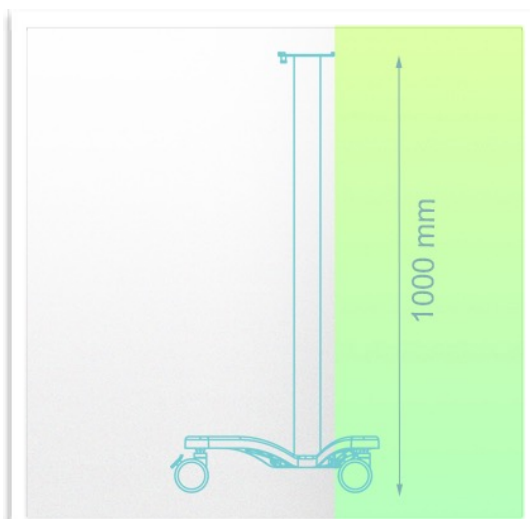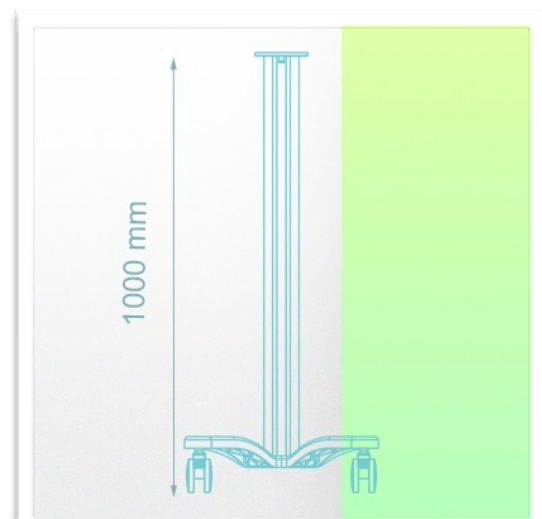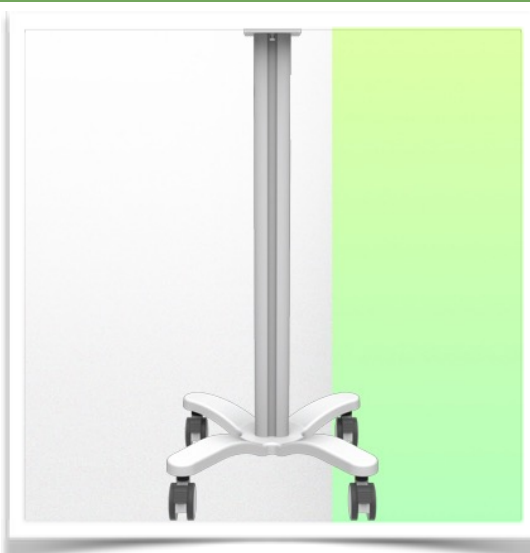

Présentation

Référence: WM 555.119







Chariot WorkiMed Light Cart pour écran

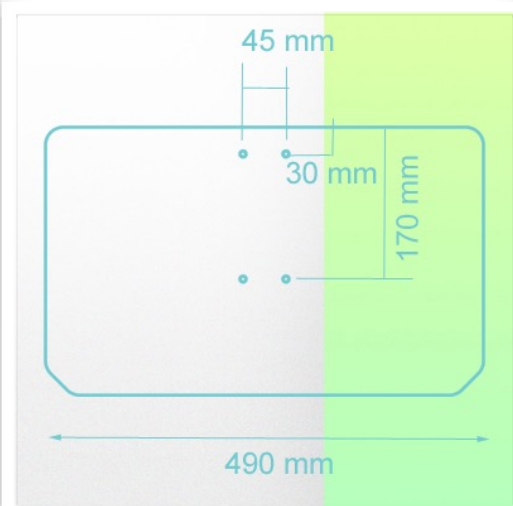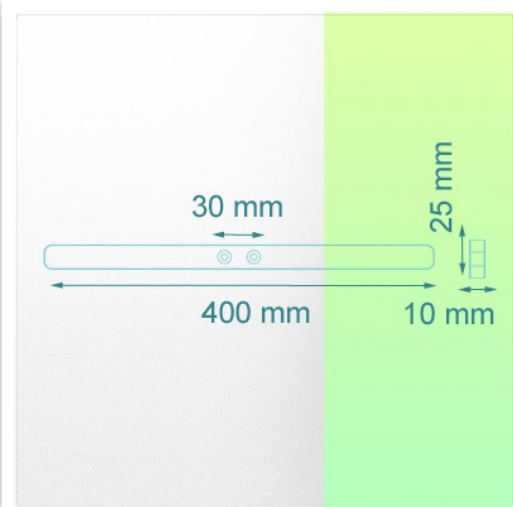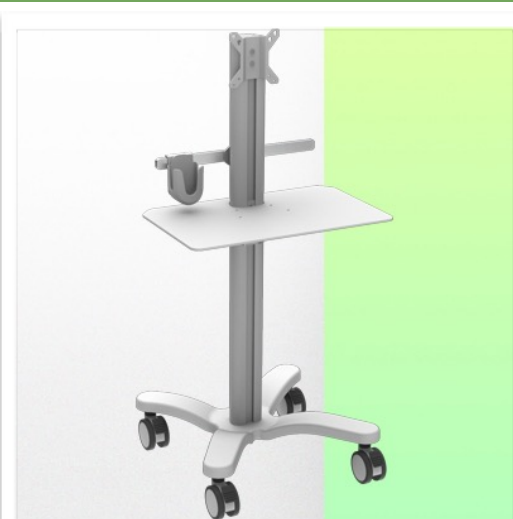

Présentation

Référence: WM 555.119

Chariot WorkiMed Light Cart pour écran

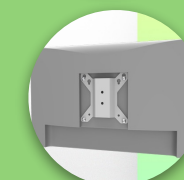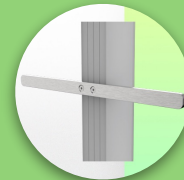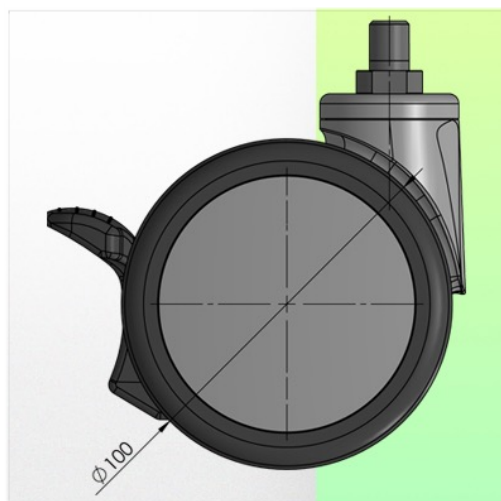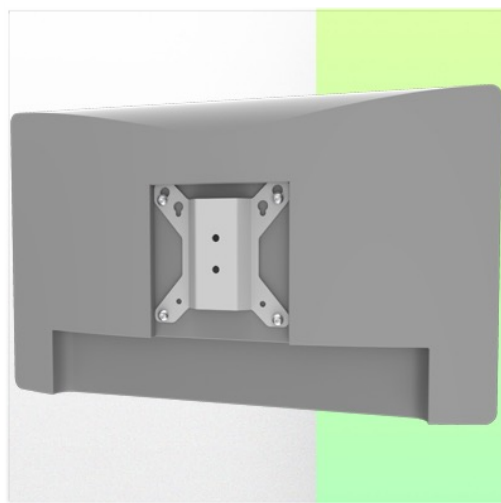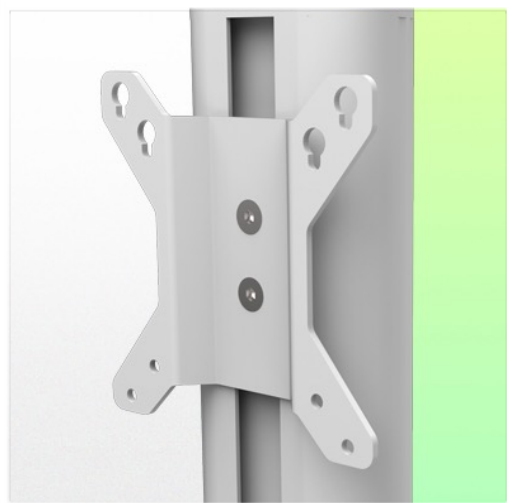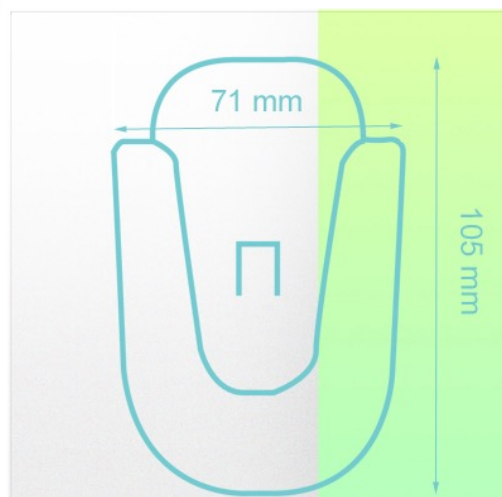

Présentation

Référence: WM 555.119

Chariot WorkiMed Light Cart pour écran

Caractéristiques Techniques:

- * * Hauteur de la Colonne avec base: 1000 mm
 - * Plan de travail L490 x P300 mm
 - * Support Din rail 400 mm
 - * Support Souris pour Din Rail
 - * Construction des roues : Polyamide avec bande de roulement en polyuréthane.
 - * Roues/Blocage : 4 roues bloquantes avec frein, 100 mm de diamètre
 - * Poids du chariot: 12 Kg
 - * Capacité de chargement: 20 Kg
 - * Assemblage principal: Aluminium
 - * Diamètre de la base 630 mm
 - * Couleur : Ral 9016 Blanc
 - * Les certificats sont conformes à : IEC60601-1 : 2012 (Edition 3)
 - * CE/Rohs compliant
 - * Entièrement recyclable
 - * Garantie 10 ans
 - * Large gamme d'accessoires
 - * Pour un nettoyage plus rapide et plus facile
 - * Conception simple et légère
 - * Fourni entièrement assemblé avec un emballage minimal
 - * Fabriqué en Europe (Concept et développement MCC John Gough)
- * Nous pouvons réaliser également des chariots sur mesure en fonction de vos besoins et aux couleurs de votre hôpital en option



Chariot WorkiMed Light Cart pour écran

Procédure de nettoyage

1. Le chariot peut être nettoyé avec la plupart des solutions douces et non abrasives couramment utilisées en milieu hospitalier (par exemple, des solutions diluées d'eau de Javel, d'ammoniaque ou d'alcool).
2. La finition de la surface sera endommagée de façon permanente par les produits chimiques et les solvants puissants tels que l'acétone et le trichloréthylène.
3. N'utilisez pas de laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs pour nettoyer l'ensemble de montage.
4. Les dommages causés par l'utilisation de substances ou de procédés non approuvés ne seront pas couverts par la garantie. Nous vous recommandons de tester toute solution de nettoyage sur une petite zone qui n'est pas visible afin de vérifier la compatibilité.
5. Essuyez immédiatement tout produit de nettoyage sur le bras à l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau.
6. Séchez soigneusement le chariot après le nettoyage.

ATTENTION : WorkiWay SRL ne fait aucune déclaration concernant l'efficacité des produits chimiques ou des processus énumérés comme moyen de contrôle des infections.

Consultez le responsable du contrôle des infections ou l'épidémiologiste de votre hôpital. Pour nettoyer ou stériliser les instruments montés ou accessoires, consultez les instructions spécifiques fournies avec ces produits.

